

MANUTENÇÃO

DOS MICROMOTORES DE IMPLANTOLOGIA MX-i.



Consulte o manual de utilização do produto para obter informações sobre os procedimentos completos de manutenção, limpeza e esterilização. Este dispositivo médico é fornecido "não esterilizado". Antes de ser utilizado, siga o presente procedimento.

1 LIMPEZA



A. LIMPEZA INTERNA

- Enxague o interior da peça com água corrente <math><38\text{ }^\circ\text{C}</math>

B. LIMPEZA EXTERNA

- Limpe o exterior da peça com água corrente <math><38\text{ }^\circ\text{C}</math>

2 DESINFEÇÃO



A. DESINFEÇÃO COM DESINFETANTE DE SUPERFÍCIES (respeitar as indicações de utilização do fabricante)

- ⊘ Não mergulhar o instrumento num banho desinfetante

OU

B. DESINFEÇÃO TÉRMICA (respeitar as indicações de utilização do fabricante)

3 ESTERILIZAÇÃO



A. COLOQUE O MOTOR NUMA SAQUETA DE ESTERILIZAÇÃO

B. ESTERILIZE DE ACORDO COM AS INDICAÇÕES DO FABRICANTE

- Os instrumentos com o símbolo  podem ser esterilizados em autoclave


MANUTENÇÃO

ACESSÓRIOS




SPRAYNET
500 ml spray de limpeza


Embalagem de 6 unidades
REF. 1600036-006

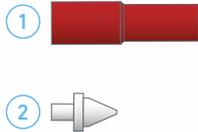

LUBRIFLUID
500 ml lubrificante
Embalagem de 6 unidades
REF. 1600064-006

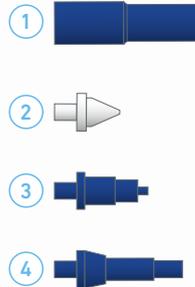

AQUACARE
500 ml spray de limpeza
Embalagem de 6 unidades
REF. 1600617-006

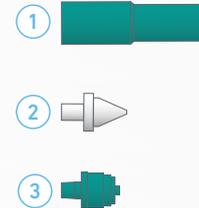

LUBRICARE
Sistema de manutenção
REF. 1600915-001



LUBRIMED
Embalagem de 6 aplicadores
REF. 1600037-006



DESENTUPIDOR DE SPRAY
Embalagem de 10 unidades
REF. 1000001-010