

# MANUTENÇÃO

## DOS MICROMOTORES COM ESCOVAS MC2 E MC3.



Consulte o manual de utilização do produto para obter informações sobre os procedimentos completos de manutenção, limpeza e esterilização. Este dispositivo médico é fornecido "não esterilizado". Antes de ser utilizado, siga o presente procedimento.

### 1 PREPARAÇÃO



A. DESACOPLAR O MOTOR DO CABO

B. RETIRAR A COBERTURA


### 2 LIMPEZA



A. LIMPEZA EXTERNA

- Limpeza externa com Spraynet

### 3 DESINFEÇÃO

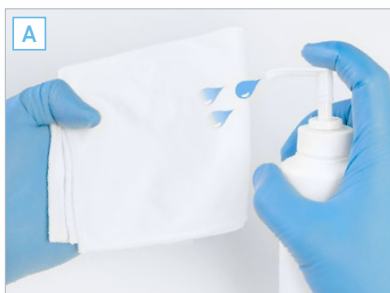

A. DESINFEÇÃO COM DESINFETANTE DE SUPERFÍCIES (respeitar as indicações de utilização do fabricante)


- ⊘ Não mergulhar o instrumento num banho desinfetante

### 4 ESTERILIZAÇÃO



A. COLOQUE A COBERTURA DO MOTOR NUMA SAQUETA DE ESTERILIZAÇÃO

B. ESTERILIZE DE ACORDO COM AS INDICAÇÕES DO FABRICANTE

- Os instrumentos com o símbolo  podem ser esterilizados em autoclave

# MANUTENÇÃO

## ACESSÓRIOS



**SPRAYNET**  
500 ml spray de limpeza  
Embalagem de 6 unidades  
REF. 1600036-006



**LUBRIFLUID**  
500 ml lubrificante  
Embalagem de 6 unidades  
REF. 1600064-006



**AQUACARE**  
500 ml spray de limpeza  
Embalagem de 6 unidades  
REF. 1600617-006



**LUBRICARE**  
Sistema de manutenção  
REF. 1600915-001



**LUBRIMED**  
Embalagem de 6 aplicadores  
REF. 1600037-006



**DESENTUPIDOR DE SPRAY**  
Embalagem de 10 unidades  
REF. 1000001-010